


## EZINJECT HIGH FLOW CATHETER

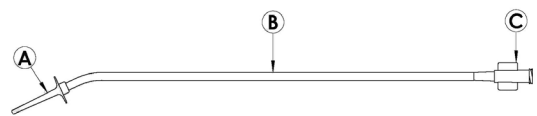

### THIS PRODUCT DOES NOT CONTAIN LATEX

#### eZinject Catheter

- A. Cervical Stop
- B. Shaft
- C. Luer

#### DESCRIPTION:

The eZinject Catheter High Flow is a uterine injector for single use. This is a sterile disposable device made of polyvinyl chloride, which meets USP recommendations for implant testing. The product is designed with a single lumen for injection of fluid through a distal tip. The product is slightly curved to facilitate easy entrance to the cervical canal. The distal tip is a tapered design with a cervical stop, preventing excessive penetration. The proximal end is equipped with a luer fitting on a flexible sleeve to accommodate a syringe.

#### INDICATIONS:

The eZinject Catheter High Flow is indicated for such procedures as Sonohysterography. It is designed for "in office use." This device can be applied without cervical dilation or anesthesia if the uterus can be sounded easily with a standard uterine sound. The eZinject Catheter High Flow provides for efficient sealing of the cervix when injections of liquid are required.

#### CONTRAINDICATIONS:

- Pregnancy
- Uterine or tubal infection

#### WARNINGS:

- To avoid uterine trauma, insert the eZinject Catheter High Flow along the natural axis of the cervical canal

#### PRECAUTIONS:

- Lubricate distal end for easy insertion.
- Observe manufacturer's directions and precautions pertaining to any liquid media or gas that is being injected into the patient

#### ADVERSE REACTIONS:

- Cramping
- Infection

#### INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Check to see that the sterile pouch containing the eZinject Catheter High Flow has not been punctured or damaged thus compromising sterility.
2. Using a speculum, expose the cervix and grasp the anterior lip with a single tooth tenaculum.
3. Lubricate the distal tip for easy insertion. Carefully guide the instrument along the natural axis of the cervix to avoid injury.
4. Injected media may be applied with a standard syringe or extenders as needed.
5. Carefully remove the eZinject Catheter High Flow after all injecting is completed.


#### PRODUCT INFORMATION:

Product Number: TMI1162-HF  
OD Size: 2mm to 4mm taper  
Length: 29cm  
Packaging: 10 sterile units per box

MANUFACTURED BY:  
MedGyn Products, Inc.  
100 W. Industrial Rd. Addison,  
IL 60101 USA  
Telephone: +1 630.627.4105  
Toll-free: +1 800.451.9667  
Fax: +1 630.627.0127



## EZINJECT HOGERE FLOW CATHETER

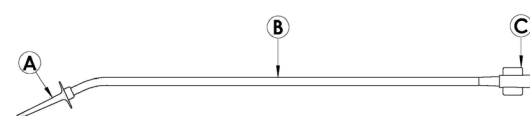

### DIT PRODUCT BEVAT GEEN LATEX

#### eZinject Catheter

- A. Cervicale Stop
- B. Schacht
- C. Luer

#### BESCHRIJVING:

De eZinject hogere flow catheter is een uteriene injector voor éénmalig gebruik. Dit is een steriel wegwerpapparaat gemaakt van polyvinylchloride, dat voldoet aan de aanbevelingen van USP voor testen van implantaten. Het product is ontworpen met één lumen voor injectie van vloeistof door een distale tip. Het product is licht gebogen om gemakkelijke toegang tot het cervicale kanaal mogelijk te maken. De distale tip heeft een taps ontwerp met cervicale stop, die excessieve penetratie voorkomt. Het proximale eind is uitgerust met een luer die op een flexibele hoes past om plaats te bieden aan een spuit.

#### INDICATIES:

De eZinject hogere flow catheter is geïndiceerd voor ingrepen als sonohysterografie. Het is ontworpen voor poliklinisch gebruik. Dit apparaat kan toegepast worden zonder cervicale dilatatie of anesthesie indien de uterus gemakkelijk gesondeerd kan worden met een standaard uteriene sonde. De eZinject hogere flow catheter zorgt voor efficiënte afsluiting van de cervix indien vloeistofinjecties nodig zijn.

#### CONTRA-INDICATIES:

- Zwangerschap
- Uteriene of eileiderinfectie

#### WAARSCHUWINGEN:

- Voer, om trauma aan de baarmoeder te voorkomen, de eZinject hogere flow catheter in langs de natuurlijke as van het cervicale kanaal

#### VOORZORGSMAATREGELEN:

- Distal eind smeren voor gemakkelijke insertie.
- Voer de aanwijzingen en voorzorgsmaatregelen van de fabrikant uit in relatie tot enige vloeibare media of gas die in de patiënt geïnjecteerd worden

#### NADELIGE REACTIES:

- Verkrampen
- Infectie

#### GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Controleer om te zien of de steriele verpakking met de eZinject hogere flow catheter niet doorboord of beschadigd is, waardoor de steriliteit in het geding is.
2. Leg de cervix m.b.v. een speculum bloot en pak de anterieure mond met een ééntandig tenaculum vast.
3. Distal eind smeren voor gemakkelijke insertie. Voer het instrument voorzichtig langs de natuurlijke as van de cervix om letsel te voorkomen.
4. Geïnjecteerde media kunnen naar behoefte worden toegepast met een standaard spuit of uittrekkers.
5. Verwijder de eZinject hogere flow catheter voorzichtig nadat injectie afgerond is.


#### PRODUCTINFORMATIE:

Productnummer: TMI1162-HF  
BD maat: 2mm – 4mm  
Lengte: 29cm  
Verpakking: 10 steriele eenheden per doos

GEPRODUCEERD DOOR:  
MedGyn Products, Inc.  
100 W. Industrial Rd. Addison,  
IL 60101 USA  
Telephone: +1 630.627.4105  
Toll-free: +1 800.451.9667  
Fax: +1 630.627.0127



## CATHETER EZINJECT A HAUT DEBIT

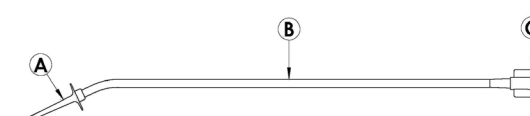

### CE PRODUIT NE CONTIENT PAS DE LATEX

#### eZinject Catheter

- A. Butée cervicale
- B. Tige
- C. Luer

#### DESCRIPTION:

Le cathéter eZinject à Haut Débit est un dispositif d'injection utérin à usage unique. Il s'agit d'un dispositif jetable stérile, fabriqué en chlorure de polyvinyle, qui satisfait aux recommandations USP pour le test des implants. Le produit est conçu avec une lumière unique pour l'injection de liquide à travers une pointe distale. Le produit est légèrement incurvé pour faciliter l'entrée jusqu'au canal cervical. La pointe distale est conique et comporte une butée cervicale pour empêcher une pénétration excessive. L'extrémité distale est munie d'un raccord Luer sur un manchon souple pour recevoir une seringue.

#### INDICATIONS:

Le cathéter eZinject à Haut Débit est indiqué pour des interventions comme hystéroéchographie. Il est conçu « à usage professionnel ». Ce dispositif peut être appliqué sans dilatation du col ni anesthésie si l'utérus peut être exploré facilement avec une sonde utérine standard. Le cathéter eZinject à Haut Débit permet une bonne éanchéité du col lorsque des injections de liquide sont nécessaires.

#### CONTRE-INDICATIONS:

- Grossesse
- Infection utérine ou tubaire

#### AVERTISSEMENTS:

- Pour éviter tout risque de traumatisme utérin, insérer le cathéter eZinject à Haut Débit le long de l'axe naturel du canal cervical

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI:

- Lubrifier l'extrémité distale pour faciliter l'insertion.
- Respecter les instructions et précautions d'emploi du fabricant en ce qui concerne tout milieu liquide ou gazeux à injecter chez une patiente

#### REACTIONS INDESIRABLES:

- Crampes
- Infection

#### MODE D'EMPLOI:

1. S'assurer que le sachet stérile contenant le cathéter eZinject à Haut Débit n'a pas été perforé ou endommagé, compromettant ainsi sa stérilité.
2. À l'aide d'un petit crochet, révéler le col et saisir la lèvres antérieure avec un petit crochet à une seule dent.
3. Lubrifier la pointe distale pour faciliter l'insertion. Guider attentivement l'instrument le long de l'axe naturel du col pour éviter tout risque de blessure.
4. Le milieu injecté peut être appliqué avec une seringue standard ou des prolongateurs, comme il convient.
5. Retirer avec précaution le cathéter eZinject à Haut Débit après avoir terminé toutes les injections.


#### RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT:

Numéro d'article: TMI1162-HF  
Diamètre Externe: Conique de 2mm vers 4mm  
Longueur: 29cm  
Conditionnement: 10 unités stériles par boîte

FABRIQUÉ PAR:  
MedGyn Products, Inc.  
100 W. Industrial Rd. Addison,  
IL 60101 USA  
Téléphone: +1 630.627.4105  
Toll-free: +1 800.451.9667  
Fax: +1 630.627.0127



## EZINJECT HOHE DURCHFLUSSMENGE KATHETER

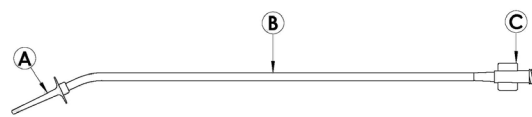

### DIESES PRODUKT ENTHÄLT KEIN LATEX

#### eZinject Catheter

- A. Zervikalsperre  
B. Schaft  
C. Luer

#### BESCHREIBUNG:

Der eZinject hohe durchflussmenge katheter ist ein Gebärmutterinjektor für den einmaligen Gebrauch. Es handelt sich um aus Polyvinylchlorid hergestelltes Einweg-Instrument, das den USP-Empfehlungen für Implantattests entspricht. Das Produkt hat ein einziges Lumen zur Flüssigkeitsinjektion durch eine Distalspitze. Das Produkt ist leicht gekrümmt und erleichtert so das Einführen in den Zervikalkanal. Die Distalspitze läuft konisch zu und hat eine Zervikalsperre, die übermäßige Penetration verhindert. Das proximale Ende ist mit einem Luer-Anschluss auf einem flexiblen Beutel versehen, der sich an eine Spritze anpasst

#### INDIKATIONEN:

Der eZinject hohe durchflussmenge katheter ist für Verfahren wie Sonohysterographie indiziert. Er ist für den „Praxisgebrauch“ gedacht. Dieses Instrument kann ohne Zervikalweitung oder Anästhesie angewendet werden, wenn der Uterus leicht mit einer Standard-Gebärmuttersonde sondiert werden kann. Der eZinject hohe durchflussmenge katheter gewährleistet eine effiziente Abdichtung der Zervix, wenn Flüssigkeitsinjektionen erforderlich sind.

#### KONTRAINDIKATIONEN:

- Schwangerschaft
- Gebärmutter- oder Eileiterinfektion

#### WARNHINWEISE:

- Zur Vermeidung eines Gebärmuttertraumas den eZinject hohe durchflussmenge katheter entlang der natürlichen Achse des Zervikalkanals einführen

#### VORSICHTSMAßNAHMEN:

- Das distale Ende zum leichten Einführen einschmieren.
- Die Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen des Herstellers hinsichtlich beim Patienten zu injizierender Flüssigkeiten und Gase beachten.

#### NEBENWIRKUNGEN:

- Spasmus
- Infektionen

#### GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Überprüfen, ob der sterile Beutel, der den eZinject hohe durchflussmenge katheter enthält, nicht durchlöchert oder beschädigt wurde und so die Sterilität verliert.
2. Die Zervix mit einem Spekulum exponieren und die vordere Lippe mit einem Einzinkerhaken greifen.
3. Die Distalspitze zum leichten Einführen einschmieren. Das Instrument entlang der natürlichen Achse der Zervix ein führen, um Verletzungen zu vermeiden.
4. Injizierte Mittel können mit einer Standardspritze oder Expander, so wie benötigt, verabreicht werden.
5. Den eZinject hohe durchflussmenge katheter nach Abschluss aller Injektionen vorsichtig entfernen.


#### PRODUKTINFORMATIONEN:

Produktnummer: TMI1162-HF  
Außendurchmesser: 2mm bis 4mm Zuspitzung  
Länge: 29cm  
Verpackung: 10 sterile Einheiten pro Packung

HERGESTELLT DURCH:  
MedGyn Products, Inc.  
100 W. Industrial Rd. Addison,  
IL 60101 USA  
Telefon: +1 630.627.4105  
Toll-free: +1 800.451.9667  
Fax: +1 630.627.0127



## CATETERE EZINJECT AD ALTO FLUSSO

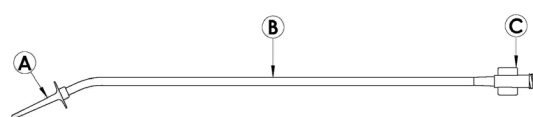

### QUESTO PRODOTTO NON CONTIENE LATTICE

#### eZinject Catheter

- A. Arresto Cervicale  
B. Stelo  
C. Luer

#### DESCRIZIONE:

Il catetere eZinject ad alto flusso è un iniettore uterino per uso singolo. Questo è un dispositivo sterile monouso realizzato in polivinil cloruro, che soddisfa i consigli USP per i test di impianto. Il prodotto è progettato con un singolo lume per l'iniezione di fluido attraverso una punta distale. Il prodotto è leggermente curvato per facilitare l'ingresso nel canale cervicale. La punta distale ha una progettazione rastremata con un arresto cervicale, che impedisce una penetrazione eccessiva. L'estremità prossimale è dotata di un raccordo luer su un manicotto flessibile per alloggiare una siringa.

#### INDICAZIONI:

Il catetere eZinject ad alto flusso è indicato per procedure quali sonoisterografia. È progettato per "l'uso in ufficio". Questo dispositivo può essere applicato senza dilatazione cervicale o anestesia se l'utero può essere sondato facilmente con una sonda uterina standard. Il catetere eZinject ad alto flusso fornisce una chiusura efficiente della cervice quando sono richieste iniezioni di liquido.

#### CONTROINDICAZIONI:

- Gravidanza
- Infezione uterina o tubarica

#### AVVERTENZE:

- Per evitare i traumi uterini, inserire il catetere eZinject ad alto flusso lungo l'asse naturale del canale cervicale

#### PRECAUZIONI:

- Lubrificare l'estremità distale per facilitarne l'inserimento.
- Rispettare le indicazioni e le precauzioni del produttore relative a qualsiasi mezzo liquido o gassoso che è iniettato nel paziente

#### REAZIONI AVVERSE:

- Crampi
- Infezioni

#### ISTRUZIONI PER L'USO:

1. Verificare che la busta sterile contenente il catetere eZinject ad alto flusso non sia stata perforata né danneggiata, compromettendo così la sterilità.
2. Utilizzando uno speculum, esporre la cervice e afferrare il labbro anteriore con un tenacolo a dente singolo.
3. Lubrificare la punta distale per facilitarne l'inserimento. Guidare con cura lo strumento lungo l'asse naturale della cervice per evitare lesioni.
4. Il mezzo iniettato può essere applicato con una siringa standard o con estensori se necessario.
5. Rimuovere con cautela il catetere eZinject ad alto flusso dopo il completamento di tutta l'iniezione.


#### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Numero del prodotto: TMI1162-HF  
Diametro esterno: Rastremazione da 2mm a 4mm  
Lunghezza: 29cm  
Confezione: 10 unità sterili per pacchetto

FABBRICATO DA:  
MedGyn Products, Inc.  
100 W. Industrial Rd. Addison,  
IL 60101 USA  
Telefono: +1 630.627.4105  
Toll-free: +1 800.451.9667  
Fax: +1 630.627.0127



## CATÉTER EZINJECT ALTO FLUIDO

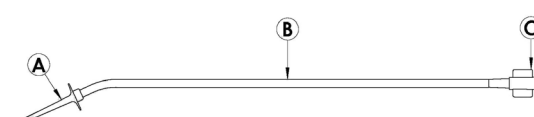

### ÉSTE PRODUCTO NO CONTIENE LÁTEX

#### eZinject Catheter

- A. Tope Cervical  
B. Eje  
C. Luer

#### DESCRIPCIÓN:

El Catéter eZinject Alto Fluido es un inyector uterino para un solo uso. Es un dispositivo desechable hecho de cloruro de polivinilo, que cumple con las recomendaciones de la USP para pruebas con implantes. El producto está diseñado con un solo canal interno para inyección de fluido a través de una punta distal. El producto está ligeramente curvado para facilitar la entrada al canal cervical. La punta distal tiene un diseño cónico con un tope cervical que impide una penetración excesiva. El extremo proximal está equipado con un conector luer sobre un manguito flexible para acomodar una jeringa.

#### INDICACIONES:

El Catéter eZinject Alto Fluido está indicado para procedimientos tales como sonohisterografía. Está diseñado para usarse "en el despacho de consulta". Este dispositivo puede ser aplicado sin dilatación de la cervix o sin anestesia, si se puede explorar fácilmente el útero con una sonda uterina estándar. El Catéter eZinject Alto Fluido proporciona un sellado eficaz de la cervix cuando son necesarias las inyecciones de líquido.

#### CONTRAINDICACIONES:

- Embarazo
- Infección del útero o de la trompa

#### ADVERTENCIAS:

- Para evitar el trauma uterino, inserte el Catéter eZinject Alto Fluido a lo largo del eje natural del canal cervical

#### PRECAUCIONES:

- Lubrique el extremo distal para que la inserción sea fácil.
- Siga las direcciones del fabricante y las precauciones pertinentes a cualquier medio líquido o gaseoso que se esté inyectando al paciente

#### REACCIONES ADVERSAS:

- Calambres
- Infección

#### ISTRUCCIONES DE USO:

1. Compruebe que la bolsa estéril que contiene el Catéter eZinject Alto Fluido no haya sido pinchada o dañada, en cuyo caso la esterilidad estaría comprometida.
2. Usando un espéculo, exponga la cervix y agarre el labio anterior con un tenáculo de un solo diente.
3. Lubrique la punta distal para que la inserción sea fácil. Guíe cuidadosamente el instrumento a lo largo del eje natural de la cervix para evitar lesiones.
4. El medio a inyectar puede aplicarse con una jeringa estándar o con expansores según sea necesario.
5. Retire con cuidado el Catéter eZinject Alto Fluido después de que se haya completado la inyección.

#### INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO:

Número del producto: TMI1162-HF  
Tamano de OD: Cónico de 2mm a 4mm  
Lungitud: 29cm  
Empaquetado: 10 unidades esterilizadas por caja

FABBRICATO POR:  
MedGyn Products, Inc.  
100 W. Industrial Rd. Addison,  
IL 60101 USA  
Teléfono: +1 630.627.4105  
Toll-free: +1 800.451.9667  
Fax: +1 630.627.0127

